

Made in Italy











ИТАЛЬЯНСКИЙ ЛИФТИНГ

Лифтинг, биостимуляция и глубокая гидратация кожи на год!



Протокол процедур “Итальянский лифтинг”



Процедура №	Препараты и объем	Интервал	Игла/ канюля		Методика введения	Зона коррекции
1	IAL-SYSTEM DUO: 2 мл	День 0		22 G	Техника: линейная, ретроградная Глубина введения: глубоко интрадермально, субдермально	Средняя треть лица, губы, медиальная часть щеки, виски, шея, лоб, губы
				27 G	Техника: линейная, ретроградная Глубина введения: глубоко интрадермально, субдермально	
	IAL-SYSTEM ACP: 1-2 мл			25 G	Техника: линейная, ретроградная Глубина введения: средние, глубокие слои дермы, субдермально	Периорбитальная, периоральная область, щечная область, скулы, лоб, подбородок
				30 G	Техника: линейная, ретроградная, или микроболусная. Глубина введения: средние, глубокие слои дермы	
2	IAL-SYSTEM ACP: 2 мл	Через 3-4 недели после 1-й процедуры		25 G	Техника: линейная, ретроградная Глубина введения: средние, глубокие слои дермы, субдермально	Периорбитальная, периоральная область, щечная область, скулы, лоб, подбородок
				30 G	Техника: линейная, ретроградная, или микроболусная. Глубина введения: средние, глубокие слои дермы	
3	IAL-SYSTEM ACP: 2 мл	Через 3-4 недели после 2-й процедуры		25 G	Техника: линейная, ретроградная Глубина введения: средние, глубокие слои дермы, субдермально	Периорбитальная, периоральная область, щечная область, скулы, лоб, подбородок
				30 G	Техника: линейная, ретроградная, или микроболусная. Глубина введения: средние, глубокие слои дермы	

ПРОЦЕДУРА № 1

Схема введения IAL-SYSTEM DUO

ВЕКТОР А





Точка вкола:

В зоне сращения височного отростка скуловой кости и скулового отростка височной кости

Количество векторов: 4

Объем препарата: 0,4-0,5 мл на зону на одной половине лица (0,1 - 0,125 на один вектор)

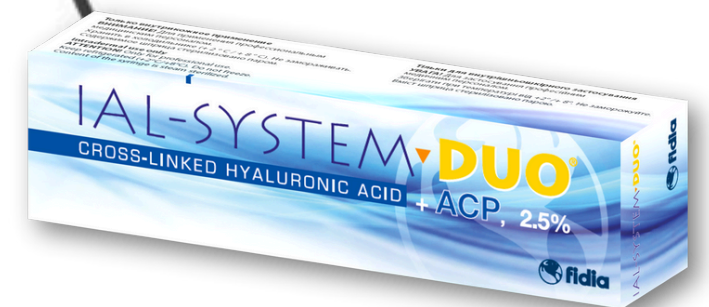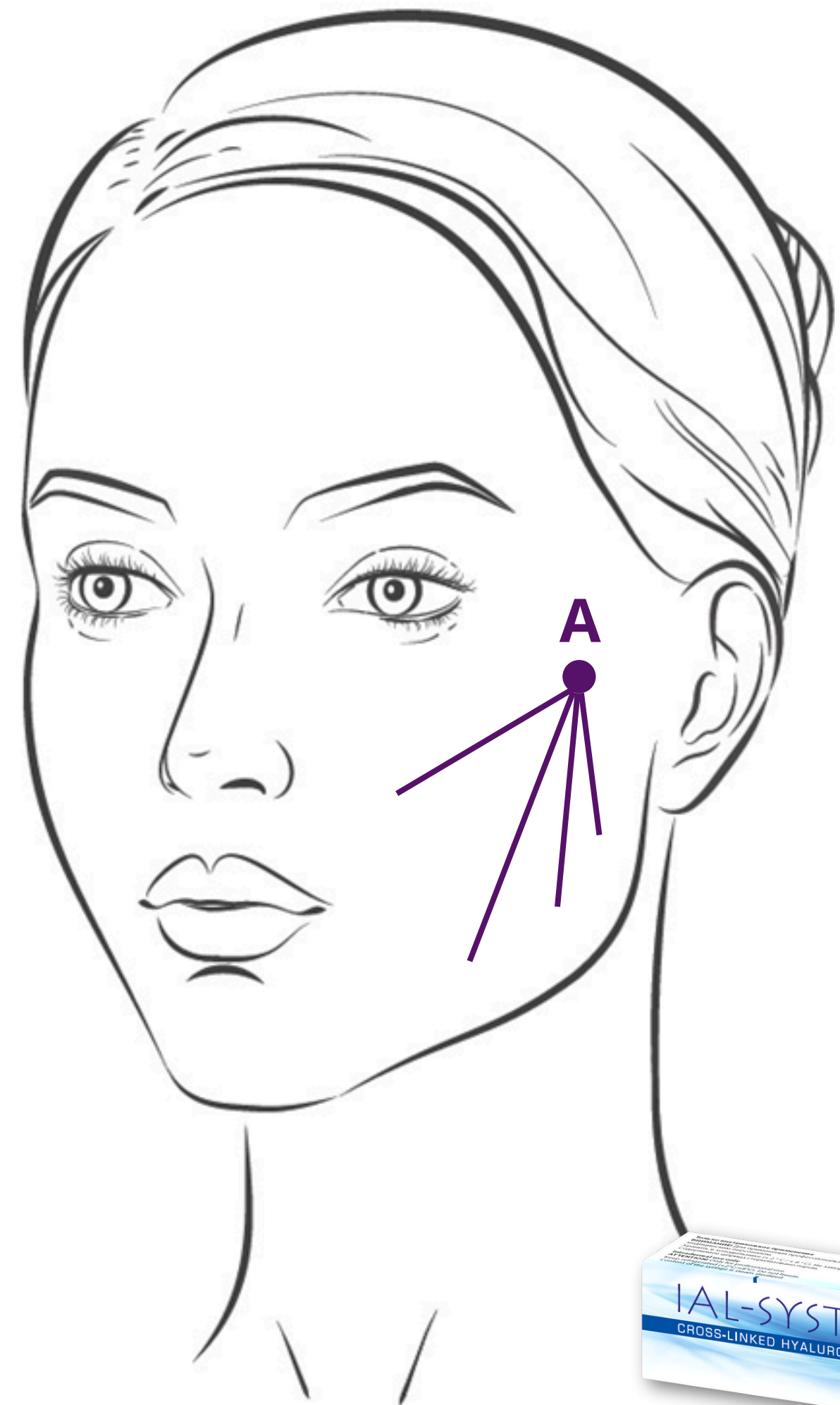

ПРОЦЕДУРА № 1

Схема введения IAL-SYSTEM DUO

ВЕКТОР В




Точка вкола:

В области угла нижней челюсти.

Количество векторов: 4

Объем препарата: 0,4 - 0,5 мл на зону на одной половине лица (0,1 - 0,125 на один вектор)

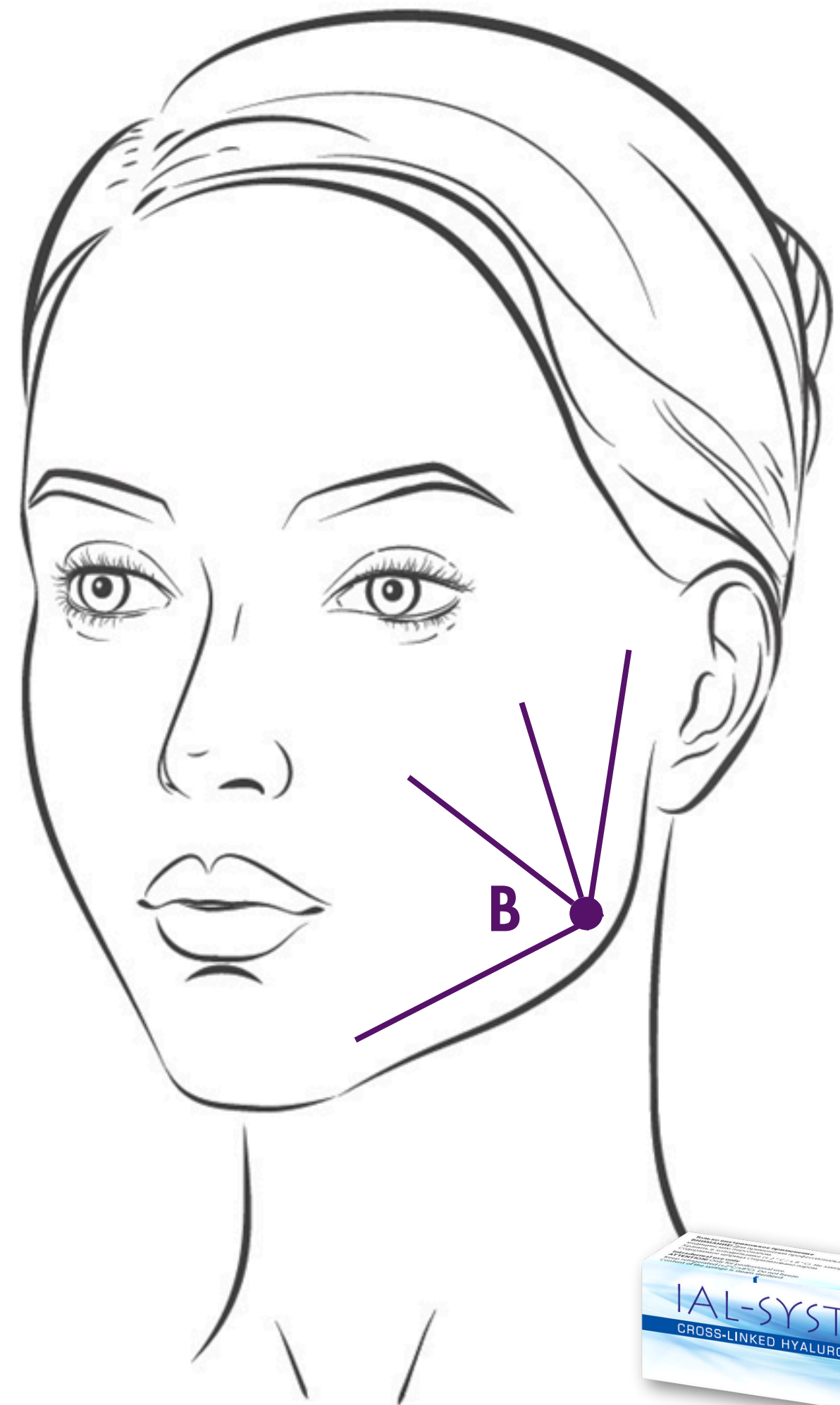

ПРОЦЕДУРА № 1

Схема введения IAL-SYSTEM DUO

ВЕКТОР С





Точка вкола:

В медиальной части щёчной области

Количество векторов: 4

Объем препарата: 0,2 мл на зону на одной половине лица (0,05 мл на один вектор)

Внимание: эти вектора не подходят для пациентов, склонных к отечности

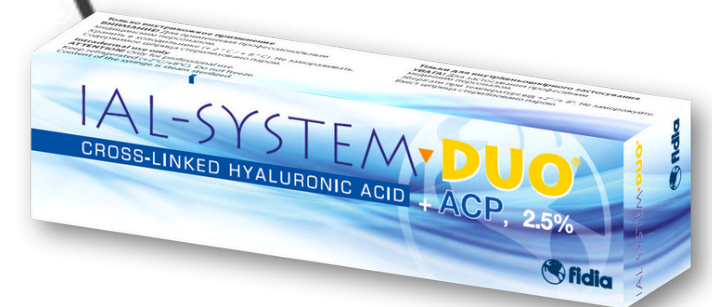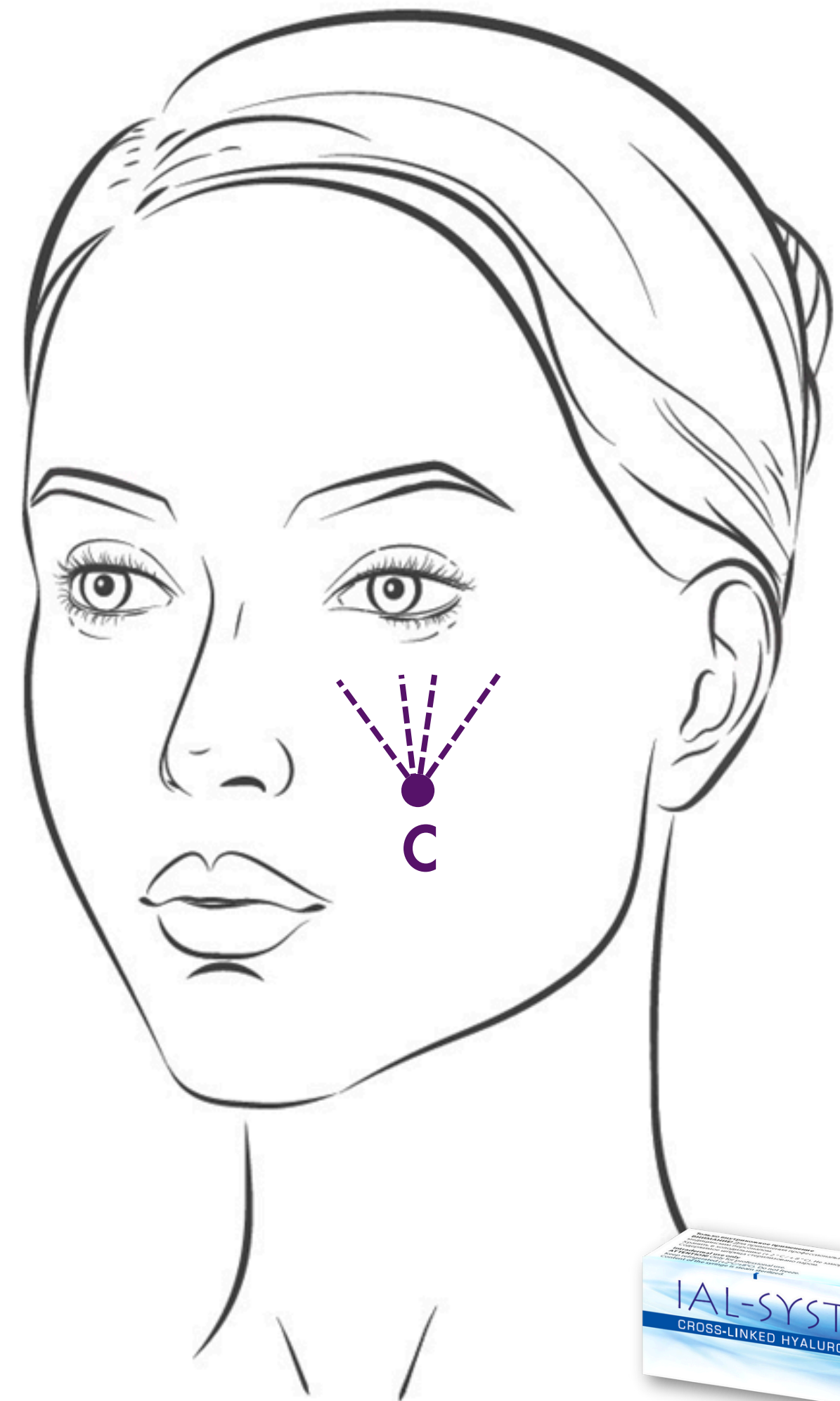

ПРОЦЕДУРА № 1

Схема введения IAL-SYSTEM ACP

**Распределение препарата
по векторам в средней и нижней трети:**

Козелок – основание носа

Козелок – комиссура рта

Козелок – контур нижней челюсти

Введение препарата канюлей линейно или
иглой микроболусно интрадермально



**Периорбитальная, периоральная область,
лоб:**


Микроболусно или коротколинейные
инъекции, без визуализации папул.



Объем препарата:

1-2мл IAL-SYSTEM ACP на все лицо

*(врач самостоятельно определяет зоны лица,
требующие инъекирования препарата IAL-SYSTEM ACP
согласно состоянию кожи)*

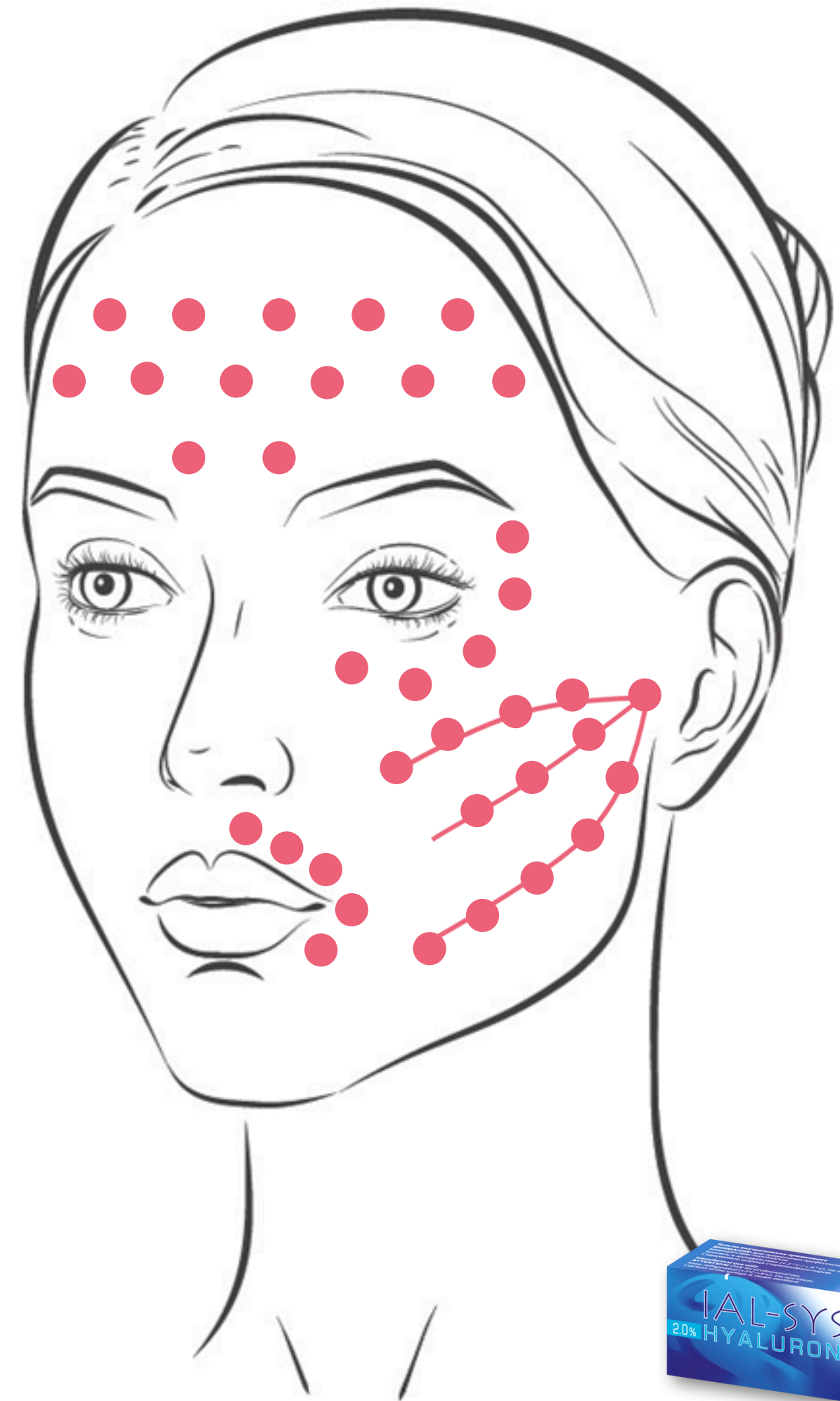


ПРОЦЕДУРА № 1

Общий объем препарата:

2 мл IAL-SYSTEM DUO на все лицо

1-2 мл IAL-SYSTEM ACP на все лицо

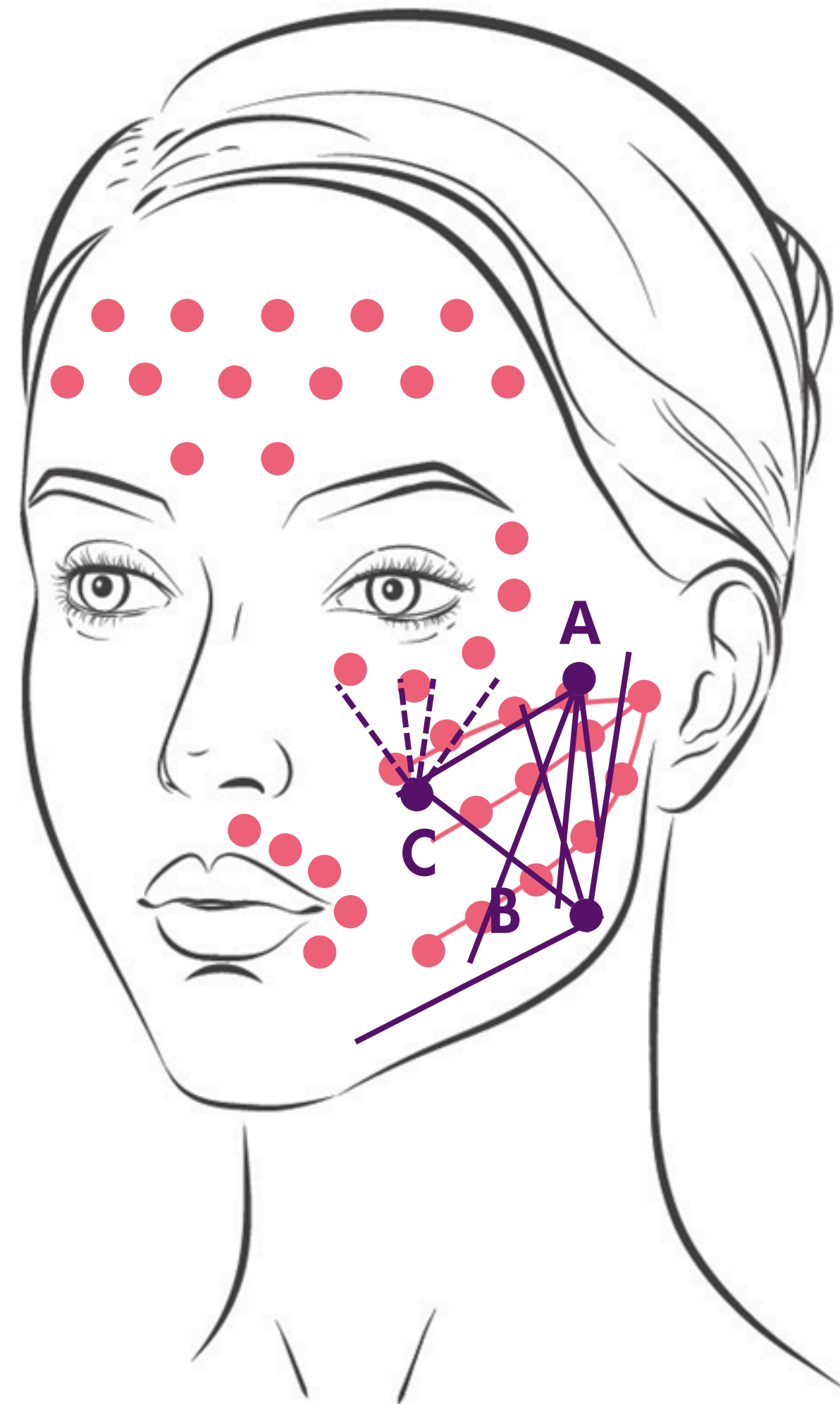

ПРОЦЕДУРА № 2

Схема введения IAL-SYSTEM ACP

**Распределение препарата
по векторам в средней и нижней трети:**

Козелок – основание носа

Козелок – коммиссура рта

Козелок – контур нижней челюсти

Введение препарата канюлей линейно или
иглой микроболусно интрадермально



**Периорбитальная, периоральная область,
лоб:**

Микроболусно или коротколинейные
инъекции, без визуализации папул.




Объем препарата:

1-2мл IAL-SYSTEM ACP на все лицо

*(врач самостоятельно определяет зоны лица,
требующие инъекирования препарата IAL-SYSTEM ACP
согласно состоянию кожи)*

Через 1 месяц после
Процедуры №1

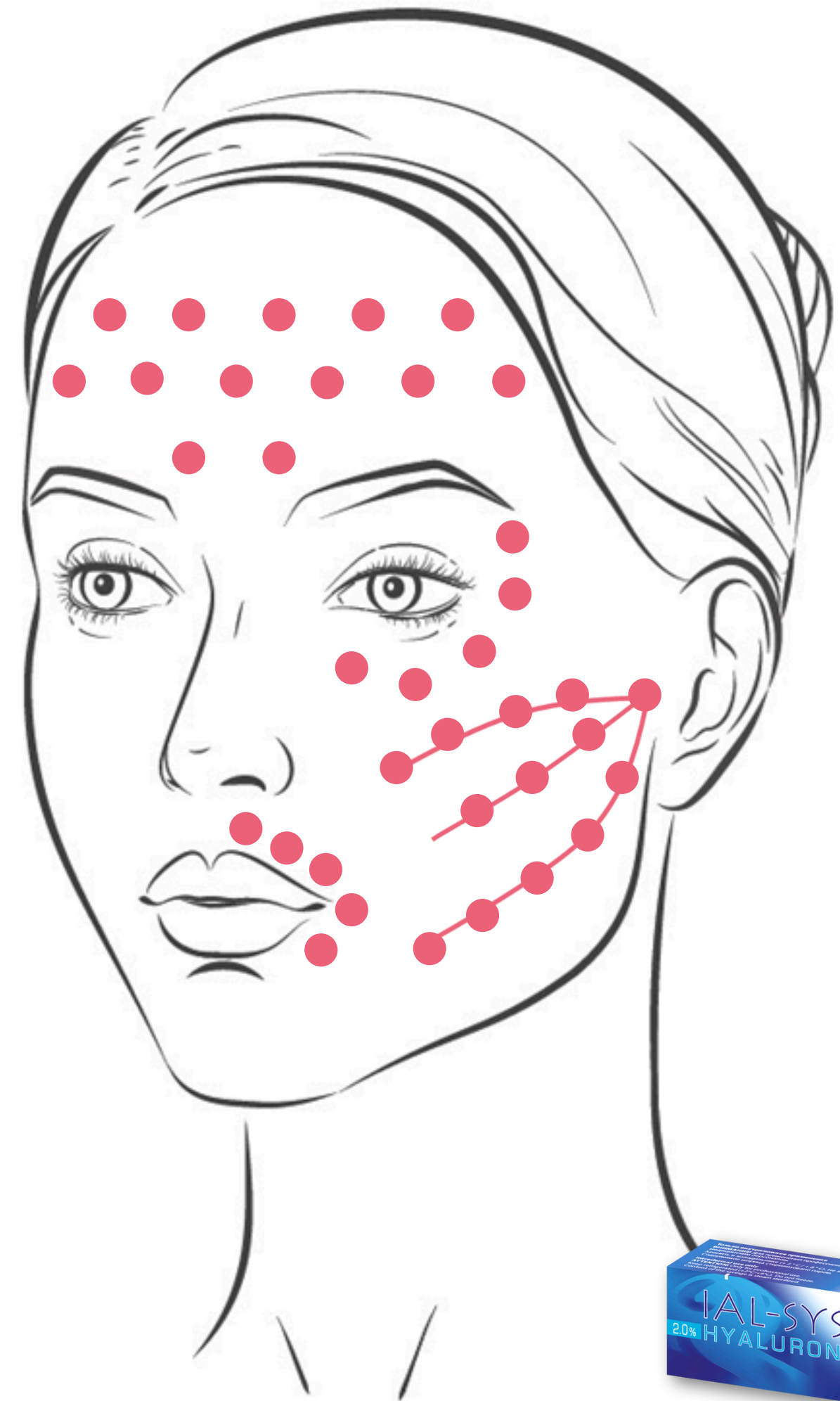

ПРОЦЕДУРА № 3

Схема введения IAL-SYSTEM ACP

Распределение препарата по векторам в средней и нижней трети:

Козелок – основание носа

Козелок – комиссура рта

Козелок – контур нижней челюсти

Введение препарата канюлей линейно или
иглой микроболусно интрадермально



Периорбитальная, периоральная область, лоб:

Микроболусно или коротколинейные
инъекции, без визуализации папул.





Объем препарата:

1-2мл IAL-SYSTEM ACP на все лицо

*(врач самостоятельно определяет зоны лица,
требующие инъекирования препарата IAL-SYSTEM ACP
согласно состоянию кожи)*

Через 1 месяц после
Процедуры №2

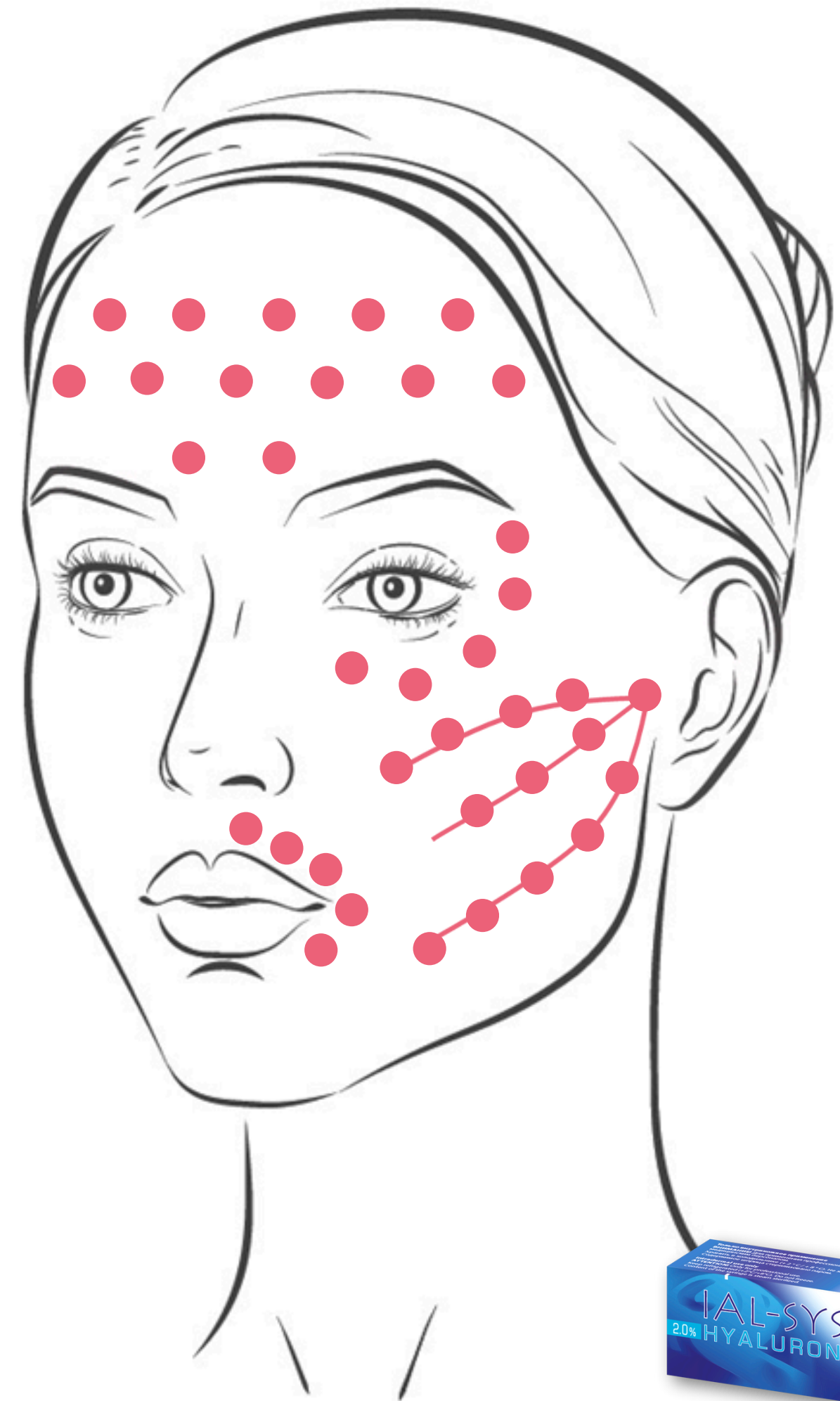

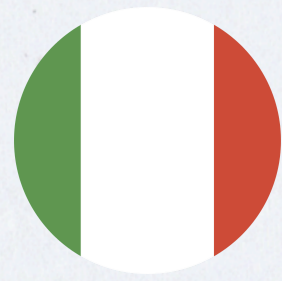

Made in Italy

Протокол

“ИТАЛЬЯНСКИЙ ЛИФТИНГ”



3

ПРОЦЕДУРЫ В КУРСЕ

2

МЕСЯЦА ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА

5

8

ШПРИЦЕВ ЗА КУРС

12

МЕСЯЦЕВ ЭФФЕКТ КОРРЕКЦИИ



“ Пусть все думают, что
влюбилась! ”

- ✓ Упругая, гладкая кожа
- ✓ Естественное сияние
- ✓ Подтянутый овал
- ✓ Молодые черты лица